

Elite sving

HEPRO



Mestring- Trygghet - Trivsel
Se og kjøp våre produkter på hepro.no

Hepro Elite Sving

Hepro Elite Sving for buede trappeløp er skreddersydd for din bolig. Du kan velge om heisen skal monteres på innersiden eller yttersiden av trappen. Skinnen vil følge veggen i hver bue og sving. Det komfortable setet er det samme på alle våre Elite trappeheiser.

Skinnegangen består av seksjoner som sammenføres med høy presisjon. Dette sørger for en jevn og god komfort når du benytter heisen.


Skinnene produseres av høyt kvalifiserte fagarbeidere. Deres kompetanse sørger for at vi kan tilby spesialtilpassede heiser for alle trappeløp.

Det er mulig å ytterligere tilpasse heisen med flere ladestasjoner, automatisk svingbart sete, automatisk foldbar fotstøtte eller et større sete.


Hepro Elite Sving kan også leveres til utendørs bruk. Skal heisen benyttes utendørs vil den bli beskyttet med et E-cote deksel, værbestandig lakkering, samt at armlener og sete blir dekket i vanntett vinyl. Når heisen ikke benyttes kan heisen dekkes med et egnet beskyttelsestrekk. For våre andre Elite-modeller, ta kontakt med din distriktsansvarlig i Hepro.

Artikkelnummer	41001
HMS-nummer	230963
Post 12	Rang. 1
Setebredde (cm)	45
Setedybde (cm)	41
Parkeringsdybde (opplått) (cm)	43
Trappebredde min (cm)	76
Skinne stigning maks (grader)	45
Skinneavslutning (cm)	48
Kjørelengde (cm)	4000
Betjeningstype	vippebryter
Driftsspenning (V)	230
Antall faser	1
Stromstyrke	1A max, 230V
Løftekapasitet (kg)	190

- A: Setehøyde
560 mm
585 mm
611 mm
636 mm
- B: Sete til fotstøtte
minimum 440 mm
maksimum 516 mm

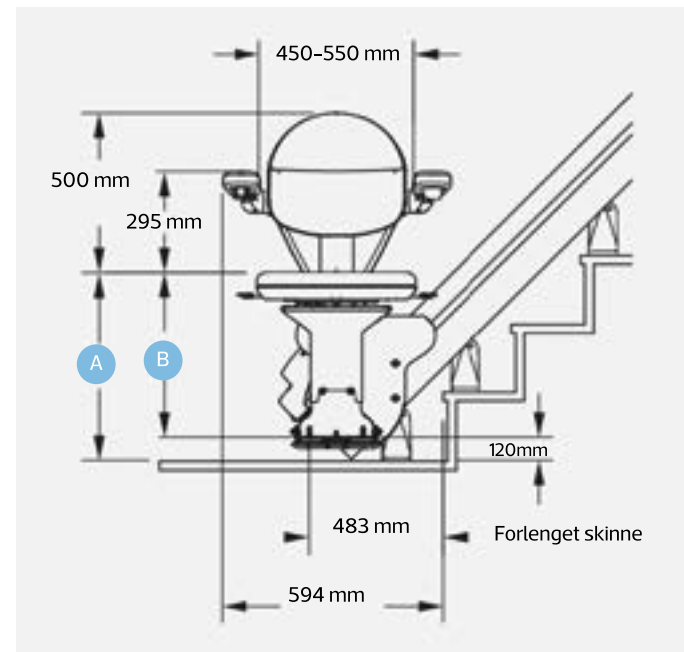


Dimensjonene er anslagsvise og vil variere avhengig av stigningsvinkel, opptrinns høyde og valgt ekstrautstyr. Ved valg av automatisk svingbart sete vil setehøyden øke med 50 mm.

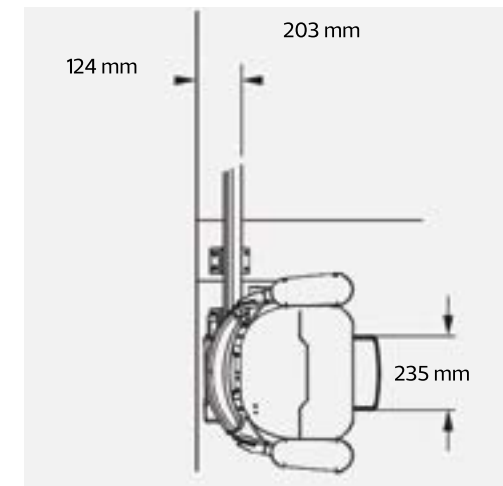


Med ekstra bred fotstøtte 290 mm.

Forlenget skinne nedre landing er basert på en 45 graders stigningsvinkel med 20 cm opptrinn på første trinn. Dimensjoner vil variere basert på stigningsvinkel og opptrinns høyde.

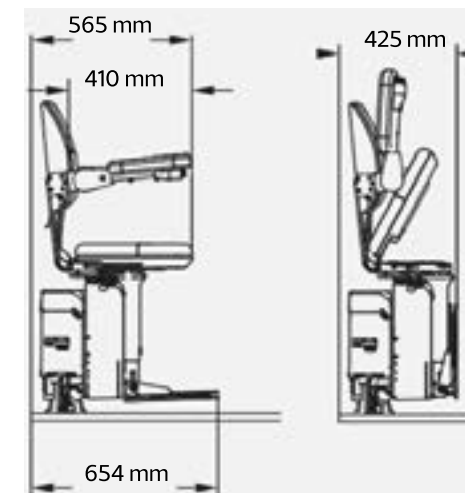

Med større fotstøtte 714 mm

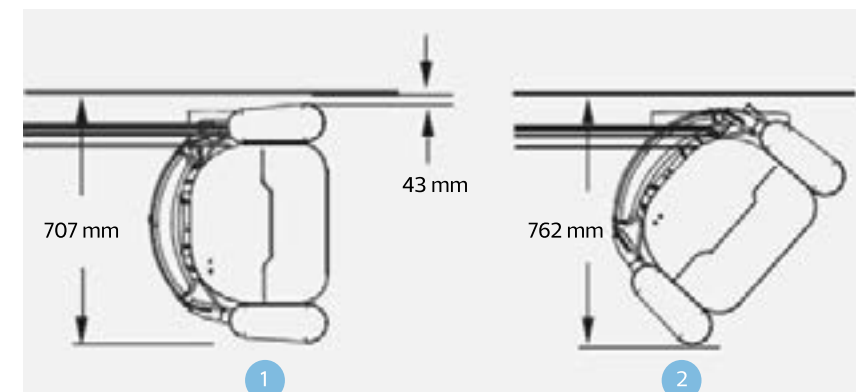

1. Sete dreiet 90 grader. 700 mm avstand fra vegg å øvre landing.
2. Sete dreiet 45 grader. 740 mm avstand fra vegg på øvre landing.

Mestring Trygghet Trivsel

Se og kjøp våre produkter på hepro.no

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.



RING OSS PÅ

46 74 55 55

✉ MARKED@HEPRO.NO